

## Meilleures pratiques, communication sur la nuance

### Appareil photo mobile iPhone

Distance idéale pour les dents antérieures d'environ 4 ½ pouces (4 – 5 pouces)



Prenez ces photos de laboratoire



Face entière



Avant



Préparation de la nuance (souce)



Effectuée



### Vérifiez votre environnement et votre éclairage

Évitez les reflets indésirables sur les languettes et les dents. Fermez les rideaux sur les grandes fenêtres faisant face au patient ou tournez votre fauteuil dentaire.

### Levez votre fauteuil dentaire à la hauteur de votre patient :

Avec le patient assis à la verticale, levez la chaise dentaire de sorte que le photographe soit à la hauteur du patient ou près de celui-ci. Cela permet de réduire les reflets indésirables des plafonniers et de contrôler l'angle de la caméra par rapport aux dents. Envisagez d'utiliser un diffuseur portatif (référence Neewer : 10078406) au-dessus de la tête du patient si l'éclat provient de plafonniers lumineux.



### Enregistrez le nom des languettes de nuance :

Sélectionnez les deux languettes de nuance (une est ok, deux sont meilleures) plus proches de la dent et prenez une photo d'elles.

### Rétraction et choix de la bonne dent :


Trop souvent, la mauvaise dent ou aucune dent n'est prise, ou encore, quand elle est prise, on ne la voit pas complètement. Aidez le patient à ouvrir avec les bords incisifs légèrement écartés. Placez le carré jusqu'à la dent et assurez-vous que la lèvre ou les doigts sont à l'écart. Si la dent en cours de restauration est une canine, essayez de photographier les controlatérales car souvent, elles sont plus faibles en valeur que les autres dents. Lorsque vous vous déplacez vers l'arrière, utilisez des enrouleurs de fil métallique en évitant ceux avec demi-ailes. Les enrouleurs à ailettes peuvent bloquer le positionnement vertical du plan.



Aucune dent



Bon exemple

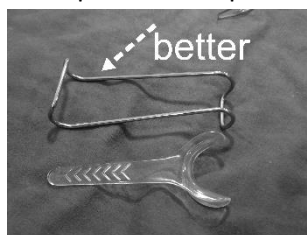

Enrouleur de fil




Enrouleur à ailettes

Retourner

## Incisives centrales

Incisives centrales simples ou les deux : Prenez 3 photos. Inférieur (photo en haut à droite, appareil photo en bas vers le haut), Normal (droit), supérieur (photo en bas à droite, haut, en bas).

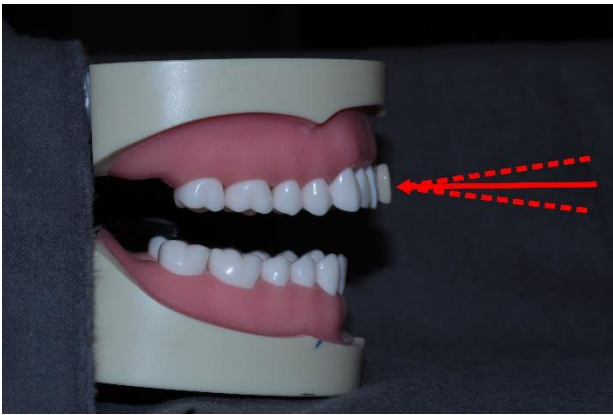

### Placement de la languette de nuance :

Placez le bord incisif de la languette de nuance sur le bord incisif et sur le même plan vertical que la dent. Si vous inclinez légèrement la languette vers l'intérieur, vers le patient, l'éclat est éliminé ou réduit. Sur les dents mandibulaires (inférieures), tenez la languette de nuance à l'horizontale et faites-la pivoter en maintenant le bord incisif jusqu'au bord incisif de la dent.



Contact :

[www.Shadewave.com](http://www.Shadewave.com)

[support@shadewave.com](mailto:support@shadewave.com)

425,5575588